

KUBOTA

高速大容量冷却遠心機

Model **7000**

新機能満載



高速冷却遠心機

コンパクトタイプ

Model **6000**



シンプルなスタイル。使いやすい新機能。




高速大容量冷却遠心機
Model 7000

IEC 61010
-2-020
国際安全規格準拠



高速冷却遠心機 コンパクトタイプ
Model 6000

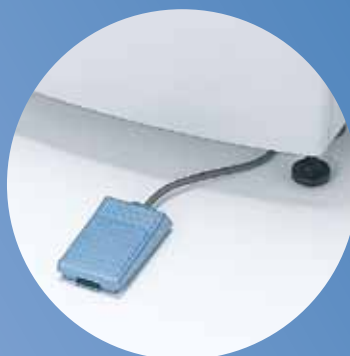

フットスイッチ (オプション)
ドアはハンズフリーで開けられます。

基本機能の充実はもちろん
日々変化する多様なニーズをしっかりとサポートし、
ルーチンワークを快適に保ちます。

NEW

ロータセットは置くだけ。しかも「ピィ」音でセット確認

セットミスによる故障、事故を防止します。

NEW

クリック音でロータカバーの取付ミス防止

取付ミスによる事故を防止します。
つまみは大きく、回しやすい形状です。

「カチカチ」と
クリック音がすると、
ロータカバー取付は
完了です。



NEW

軽量ロータは交換が楽々

従来のロータと比べてください。その軽さは
驚くほどです。(当社比)



10.1kg

250mL×6本
A-2506



13.3kg

500mL×4本
A-5004



14.9kg

500mL×6本
A-5006




14.1kg

1L×4本
A-1K4

NEW**加速・減速が速い**

加減速時間は16%～48%短縮。(当社比)

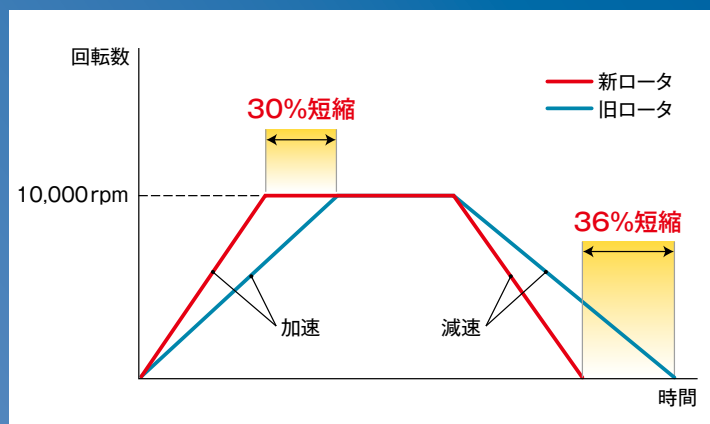

500mL×6本ロータの比較、Model 7000にて (当社比)

Special**50mLコニカル管が36,530×g～21,000×gで使用可能 (特許)**

ほとんどのメーカーのコニカル管が使えます。

(一部使えないコニカル管があります。8ページを参照してください。)

チューブ破損防止のため回転数を下げたり、特別なコニカル管を選ぶ必要がありません。



121℃オートクレーブ可能

A-508C

50mL×8本 16,500rpm、36,530×g

**A-6512C**

50mL×12本 11,500rpm、21,000×g

15mL×12本 11,500rpm、17,590×g

NEW**新開発のタイマー機能**

設定回転数に到達してからのタイマカウントダウンと、運転開始からのカウントダウンができます。

NEW

新開発のステンレス沈殿管

フル容量可能、シーリングキャップ付きで液漏れ防止

- 広口ボトルだからサンプル回収が簡単です。
- ステンレスですから耐薬品性、耐久性に優れています。
- 高速心力で使えます。



121°Cオートクレーブ可能
(サポータはオートクレーブ不可)

250mL

コードNo.052-0050



121°Cオートクレーブ可能

500mL

コードNo.052-0060



121°Cオートクレーブ可能
(外キャップはオートクレーブ不可)

1,000mL

コードNo.052-7080

Special

小型設計で実験室の有効活用

遠心機の幅は64cm、50cmで、研究スペースの確保ができます。



■ 操作パネルはつまみとキーで簡単操作

つまみを回すだけで回転数、時間、温度がすぐに設定できます。



■ ロータ温度補正機能

サンプル温度を設定温度に合わせます。

■ プレクーリング機能

ロータの予備冷却でロータ温度は急速降下します。

■ メモリフラッシング機能(特許)

スピンドルダウン運転した時間を自動メモリします。

■ 遠心力積算値($g \cdot \text{sec}$ 値)運転と測定機能

■ サンプル出し忘れ防止機能

サンプルを出し忘れたときブザー音でお知らせします。

■ 運転監視機能(オプション)

回転数、温度、時間などの運転情報をコンピュータに出力します。

■ 加減速カーブ可変機能

■ ロータ自動判別機能(特許)

ロータ マッチングガイド

| ロータタイプ | | コニカル管専用ロータ | | 中容量アングルロータ | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ロータ名称 | | A-508C | A-6512C | A-1224 | A-506 | A-508 |
| 参照ページ | | 8ページ | 8ページ | 8ページ | 8ページ | 8ページ |
| 最大容量×本数 | | 50mL コニカル管×8 | 50mL コニカル管×12 15mL コニカル管×12 | 12mL×24 | 50mL×6 | 50mL×8 |
| 50mL コニカル管 | | 8本 | 12本 | — | — | — |
| 15mL コニカル管 | | 8本 アダプタ使用 | 24本 アダプタ使用 | — | — | — |
| Model 7000 |  | 16,500rpm 36,530×g | 11,500rpm 21,000×g | 18,500rpm 42,860×g | 22,000rpm 52,490×g | 20,000rpm 48,300×g |
| Model 6000 |  | 15,000rpm 30,190×g | 10,000rpm 15,880×g | 17,000rpm 36,190×g | 20,000rpm 43,380×g | 17,500rpm 36,980×g |

| ロータタイプ | | マイクロロータ | 連続ロータ | プレート用スイングロータ | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ロータ名称 | | A-224 | C-850 | P-751 | P-89 |
| 参照ページ | | 10ページ | 10ページ | 10ページ | 10ページ |
| 最大容量×本数 | | 1.5/2.0mL×24 | 850mL | マイクロプレート×12 ディープウェルプレート×4 | マイクロプレート×8 ディープウェルプレート×4 |
| 50mL コニカル管 | | — | — | — | — |
| 15mL コニカル管 | | — | — | — | — |
| Model 7000 |  | 22,000rpm 44,370×g | 17,000rpm 25,850×g | 5,000rpm 4,390×g | 2,400rpm 1,080×g |
| Model 6000 |  | 22,000rpm 44,370×g | — | 5,000rpm 4,390×g | 2,400rpm 1,080×g |

| 軽量タイプ・大容量アングルロータ | | | | |
|--|---|---|---|---|
| A-1008 | A-2506 | A-5004 | A-5006 | A-1K4 |
|  |  |  |  |  |
| 8ページ | 9ページ | 9ページ | 9ページ | 9ページ |
| 100mL×8 | 250mL×6 | 500mL×4 | 500mL×6 | 1,000mL×4 |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| 15,500rpm 35,190×g | 13,000rpm 26,830×g | 12,000rpm 23,830×g | 10,000rpm 18,890×g | 9,000rpm 15,760×g |
| 13,500rpm 26,690×g | 11,500rpm 21,000×g | 8,500rpm 11,950×g | 8,000rpm 12,090×g | — |

| スイングロータ | | |
|--|---|---|
| S-722 | S-2504 | S-5004 |
|  053-5820 053-0020 053-5840 |  |  |
| 11ページ | 11ページ | 11ページ |
| 250mL×4 | 250mL×4 | 500mL×4 |
| 50mL コニカル管×16本 175/200/225mL コニカル管×4本 | 50mL コニカル管×4本 175/225mL コニカル管×4本 | 50mL コニカル管×12本 175/200/225mL コニカル管×4本 |
| 15mL コニカル管×32本 | 15mL コニカル管×16本 | 15mL コニカル管×28本 |
| 3,500rpm 2,380×g | 4,800rpm 4,300×g | 4,000rpm 3,080×g |
| 3,500rpm 2,380×g | 4,800rpm 4,300×g | 4,000rpm 3,080×g |

コニカル管用ロータ 高遠心力 36,530×g～21,000×g

高遠心力でもコニカル管が割れにくく、粘性の高い蛋白質の分離がきれいにできます。(特許)

チューブ破損防止のため回転数を下げたり、特別なコニカル管を選ぶ必要がありません。市販のコニカル管が使えます。



オートクレーブ(121℃)可能(注)



- 50mLコニカル管 (PP製)はキャップ直径36mmまでの、イワキ、グライナー、コーニング、ザルスタッド、ファルコン、フィッシャー、ラプコン、ヌンク社製が使えます。
アダプタ(コードNo.055-0890)を付加すると、ナルジーン製のPC、PPC0製35mLオークリッジコニカル管も使えます。
- A-508Cは、グライナー、コーニング、ラプコン製の15mLコニカル管 (PP製) が使えます。
この他に、回転数10,000rpm以下では各社のチューブが使えます。
A-6512Cは、各社の15mLコニカル管 (PP製) が使えます。

(注) オートクレーブ可能な回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

A-508C

50mL コニカル管×8
15mL コニカル管×8*

* アダプタ コードNo.055-1250が必要です。

A-6512C

50mL コニカル管×12
15mL コニカル管×12

A型アングルロータは、クリック機構の採用で、ロータ蓋の締付け限度が分かり安心です。

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000 | | 6000 | |
|--------------|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| A-508C *1,2 | 50mLコニカル管×8 | 30×117 | 16,500 | 36,530 | 15,000 | 30,190 |
| A-6512C *1,3 | 50mLコニカル管×12 | 30×117 | 11,500 | 21,000 | 10,000 | 15,880 |
| | 15mLコニカル管×12 | 17×121 | 11,500 | 17,590 | 10,000 | 13,300 |

*1 このロータには、多くのアダプタがあります。詳しくはお問い合わせください。

*2 このロータのサンプル温度は、ロータの取扱説明書をご覧ください。

*3 このロータのサンプル温度は、4℃を維持します。(室温25℃にて)

10mL～100mL 中容量アングルロータ



A-1224

12mL×24



A-506

50mL×6

●各種容量のチューブ用アダプタがあります。
お問い合わせください。



A-508

50mL×8

●各種容量のチューブ用アダプタがあります。
お問い合わせください。



A-1008

100mL×8

●各種容量のチューブ用アダプタがあります。
お問い合わせください。

A型アングルロータは、クリック機構の採用で、ロータ蓋の締付け限度が分かり安心です。

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000 | | 6000 | |
|---------------|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| A-1224 *1,4 | 12mL×24 | 15.9～16.4×103～105 | 18,500 | 42,860 | 17,000 | 36,190 |
| A-506 *2,3,4 | 50mL×6 | 28.7～29×103～109 | 22,000 | 52,490 | 20,000 | 43,380 |
| A-508 *2,3,4 | 50mL×8 | 28.7～29×103～109 | 20,000 | 48,300 | 17,500 | 36,980 |
| A-1008 *2,3,4 | 100mL×8 | 38×114 | 15,500 | 35,190 | 13,500 | 26,690 |

*1 詳しい遠心力表示については、ロータの取扱説明書をご覧ください。

*2 このロータには、多くのアダプタがあります。詳しくはお問い合わせください。

*3 バイオハザード対策用シーリングアダプタがあります。9ページをご覧ください。

*4 このロータのサンプル温度は、ロータの取扱説明書をご覧ください。

250mL～1,000mL(1L) 軽量タイプ・大容量アングルロータ



A-2506
250mL × 6

軽量タイプ
10.1kg

■ 約27%軽くなり、加減速も速くなりました。(AG-2506と比べて)

● 各種容量のチューブ用アダプタがあります。お問い合わせください。



A-5004
500mL × 4

軽量タイプ
13.3kg

■ 約40%軽くなり、加減速も速くなりました。(AG-5004と比べて)

● 各種容量のチューブ用アダプタがあります。お問い合わせください。



A-5006
500mL × 6

軽量タイプ
14.9kg

■ 約30%軽くなり、加減速も速くなりました。(AG-5006Aと比べて)

● 各種容量のチューブ用アダプタがあります。お問い合わせください。



A-1K4
1,000mL × 4

軽量タイプ
14.1kg

■ シーリングキャップは標準付属で、1,000mLのサンプルがフルに入ります。

■ 約26%軽くなり、ハンドリング、ロータ脱着が簡単です。加減速も速くなりました。(AG-1K4と比べて)

■ ボトルの口が広く、沈殿物回収が簡単です。

A型アングルロータは、クリック機構の採用で、ロータ蓋の締付け限度が分かり安心です。

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000 | | 6000 | |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| A-2506 *1,3 | 250mL × 6 | 60～62.4 × 119～137 | 13,000 | 26,830 | 11,500 | 21,000 |
| A-5004 *1,2,3 | 500mL × 4 | 69～70.2 × 155～170.5 | 12,000 | 23,830 | 8,500 | 12,360 |
| A-5006 *1,2,3 | 500mL × 6 | 69～70.2 × 155～170.5 | 10,000 | 18,890 | 8,000 | 12,090 |
| A-1K4 *1,4 | 1L × 4 | 95.7～98.3 × 194.3～196.8 | 9,000 | 15,760 | — | — |

*1 このロータには、多くのアダプタがあります。詳しくはお問い合わせください。

*2 バイオハザード対策用シーリングアダプタがあります。このページ下段をご覧ください。

*3 このロータのサンプル温度は、ロータの取扱説明書をご覧ください。

*4 このロータのサンプル温度は、4℃を維持します。(室温25℃にて)

バイオハザード対策用 シーリングアダプタ



高速アングルロータ用 シーリングアダプタ

10mLと50mLオークリッジチューブ
用と250mLボトル用があります。



10mLオークリッジ型チューブ用
コード No.055-4280



50mLオークリッジ型チューブ用
コード No.055-0530



250mL ボトル用
コード No.055-4510

高速用ロータ

A-506、A-508、A-1008、
A-5004、A-5006

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ 種類 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | コードNo. *1 | 7000 | | 6000 | |
|--------|-----------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| A-506 | 10mL オークリッジ型 | FEP | 3114-0010 | 055-4280 | 22,000 | 49,240 | 20,000 | 40,700 |
| | | PSF | 3115-0010 | | | | | |
| | | PC | 3118-0010 | | | | | |
| A-508 | | PPCO | 3119-0010 | | | | | |
| A-1008 | 50mL オークリッジ型 | FEP | 3114-0050 | 055-0530 | 15,500 | 33,040 | 13,500 | 25,060 |
| | | PSF | 3115-0050 | | | | | |
| | | PC | 3118-0050 | | | | | |
| | | PPCO | 3119-0050 | | | | | |
| A-5004 | 250mL ボトル | PPCO | 3120-0250 *2 | 055-4510 | 12,000 | 23,180 | 8,500 | 11,630 |
| | | PC | 3122-0250 *2 | | | | | |
| | | PPCO | 3141-0250 *2 | | | | | |
| A-5006 | | PC | 3140-0250 *2 | | | | | |

*1 アダプタはポリアセタール製で、キャップはポリカーボネート製です。

*2 ご使用の250mLボトルのコード番号をお知らせください。

FEP: テフロンFEP, PSF: ポリサルフォン, PC: ポリカーボネート, PPCO: ポリプロピレン・ポリマー

マイクロロータ



A-224

1.5/2mL×24
0.5mL×24
0.4mL×24
0.2mL PCR×24

(注) オートクレーブ可能な回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

オートクレーブ(121℃)可能(注)

A型アングルロータは、クリック機構の採用で、ロータ蓋の締付け限度が分かり安心です。

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000 *1 | | 6000 *1 | | アダプタ コードNo. |
|-------|-----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | |
| A-224 | 1.5/2mL×24 | 9.5~11×36~42 | 22,000 | 44,370 | 22,000 | 44,370 | — |
| | 0.5mL×24 | 7.0~7.9×25~34 | | 39,500 | | 39,500 | 055-7590 |
| | 0.4mL×24 | 5.4~6.1×26~48 | | 43,830 | | 43,830 | 055-7580 |
| | 0.2mL PCR×24 *2 | 5.9~6.3×20~24 | | 34,630 | | 34,630 | 055-0500 |

*1 Model 7000でのサンプル温度は、4℃を維持します。(室温25℃にて)

Model 6000でのサンプル温度は、ロータの取扱説明書をご覧ください。

*2 0.2mL PCRチューブは、最高回転数までは使えないことがあります。耐遠心力が低いからです。

プレート用シングロータ

シールドカバー付で、コンタミネーション防止に有効です。

DNA分離、精製、エタノール沈殿、PCRプレートのPCR産物の精製、ダイタミネータの除去などに対応できます。



P-751

マイクロプレート×12
ディープウェルプレート×4

●シールドカバー標準付属
トレイ(コードNo.055-6380)が必要です。
(オプション)



P-89

マイクロプレート×8
ディープウェルプレート×4

便利なトレイ(コードNo.055-6370)があります。(オプション)

| ロータ名称 | プレート×枚数 | 最大プレート寸法 mm | 7000 | | 6000 | |
|------------|---------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| P-751 *1,2 | マイクロプレート×12 | 86(W)×128(D)×90(H) | 5,000 | 4,390 | 5,000 | 4,390 |
| | ディープウェルプレート×4 | | | | | |
| P-89 *1,2 | マイクロプレート×8 | 86(W)×130(D)×89(H) | 2,400 | 1,080 | 2,400 | 1,080 |
| | ディープウェルプレート×4 | | | | | |

*1 このロータの納期は、お問い合わせください。

*2 遠心前にプレート類の強度をテストしてからご使用ください。下段のプレートがつぶれることがあります。

P-751用トレイ コードNo.055-6380 (オプション)



96ウェルプレート
×12枚



ディープウェルプレート
×4枚



スクエアウェルプレート
×4枚




フィルタープレート+
ディープウェルプレート×2枚



PCRプレート×2

P-89用トレイ コードNo.055-6370 (オプション)

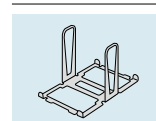

連続ロータ



C-850

850mL

(注) オートクレーブ可能な回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

オートクレーブ(121℃)可能(注)

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000 | | 6000 | |
|---------|-------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g |
| C-850 * | 850mL | — | 17,000 | 25,850 | — | — |

* このロータの納期は、お問い合わせください。

(注) オートクレープ可能な回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

スイングロータ



S-722

(バケット別売)

Max. 3,500rpm
Max. 2,380×g

バケットコードNo.
053-5820 053-0020 053-5840



S-2504

(バケット付)

シーリングキャップ
コードNo.055-0964は
別売です。

Max. 4,800rpm
Max. 4,300×g

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000/6000 | | バケット コードNo. | チューブラック アダプタ コードNo. |
|---------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | | |
| S-722 *12 | 1.5/2mL×80 | 9.5~11×36~42 | 3,500 | 2,290 | 053-5820 | 055-4800 |
| | 8mL CPT単核球分離用血管×24 *1 | 13.5~15.8×81~130 | | 2,310 | | 055-6900 |
| | 10mL (ガラス)×80 | 12~13.8×65~95 | | 2,260 | | 055-4740 |
| | 5~10mL採血管/15mL (ガラス)×48 *2 | 12~17.2×72~110 | | 2,330 | | 055-0880 |
| | 15mLコニカル管×32 | 17×121 | | 2,330 | | 055-4780 |
| | 50mL (ガラス)×8 | 27~36.4×85~110 | | 2,330 | | 055-4760 |
| | 50mLコニカル管×16 | 30×117 | | 2,330 | | 055-6070 |
| | 100mL (ガラス)×4 | 38~46.5×83~120 | | 2,330 | | 055-4770 |
| | 175/200/225mLコニカル管×4 *3,4 | 61×118/61×130/61×137 | | 2,330 | | 055-4850 |
| | 250mL×4 *5 | 60~61.8×100~134.4 | | 2,380 | | 055-4850 |
| | 自立型喀痰チューブ×8/×12/×16 | キャップ径φ48/φ37/φ31 | | 2,250~2,300 | | *6 |
| | 1.5/2mL×36 *9 | 9.5~11×36~42 | 3,500 | 2,260 | 053-0020 | 055-1190 |
| | 5~10mL採血管/15mL (ガラス)×28*2,9 | 12~17.2×72~110 | | 2,200 | | 055-1140 |
| | 15mLコニカル管×16 *9 | 17×121 | | 2,270 | | 055-1160 |
| | 50mL (ガラス)×4 *9 | 27~36.4×85~110 | | 2,200 | | 055-1150 |
| | 50mLコニカル管×4 *9 | 30×117 | | 2,260 | | 055-1170 |
| | 100mL (ガラス)×4 *9 | 38~46.5×113~120 | | 2,260 | | 055-1200 |
| | 175/225mLコニカル管×4 *10 | 61×118/61×137 | | 2,260 | | *3 |
| | 250mL×4 *5,9 | 60~61.8×100~134.4 | | 2,290 | | — |
| | 自立型喀痰チューブ×4 *9 | キャップ径φ31~φ48 | | 2,260 | | 055-1210 |
| | 5~7mL細い採血管×68 *7 | 12~13.7×62~110 | | 2,300 | 053-5840 | 055-0260 |
| S-2504 *12 | 10mL採血管/15mL (ガラス)×68 | 15~17.2×52~110 | 4,800 | 2,300 | | — |
| | 15mLコニカル管×28 | 17×121 | | 2,300 | | — |
| | 1.5/2mL×36 *9 | 9.5~11×36~42 | | 4,250 | ロータに付属 | 055-1190 |
| | 5~10mL採血管/15mL (ガラス)×28*2,9 | 12~17.2×72~110 | | 4,150 | | 055-1140 |
| | 15mLコニカル管×16 *9 | 17×121 | | 4,280 | | 055-1160 |
| | 50mL (ガラス)×4 *9 | 27~36.4×85~110 | | 4,150 | | 055-1150 |
| | 50mLコニカル管×4 *9 | 30×117 | | 4,250 | | 055-1170 |
| | 100mL (ガラス)×4 *9 | 38~46.5×113~120 | | 4,250 | | 055-1200 |
| | 175/225mLコニカル管×4 *10 | 61×118/61×137 | | 4,250 | | *3 |
| | 250mL×4 *5,9 | 60~61.8×100~134.4 | | 4,300 | | — |
| | 自立型喀痰チューブ×4 *9 | キャップ径φ31~φ48 | | 4,250 | | 055-1210 |



S-5004

(バケット、シーリングキャップ付)

Max. 4,000rpm
Max. 3,080×g

(注) オートクレープ可能な回数には制限があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

| ロータ名称 | 公称容量 | チューブ寸法 mm 直径×長さ | 7000/6000 | | バケット コードNo. | チューブラック アダプタ コードNo. |
|---------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------|
| | | | 最高回転数 rpm | 最大遠心力 ×g | | |
| S-5004 *12 | 1.5/2mL×72 | 9.5~11×36~42 | 4,000 | 3,040 | ロータに付属 | 055-0770 |
| | 5~10mL採血管/15mL (ガラス)×48 *2 | 12~17.2×72~110 | | 2,990 | | 055-0730 |
| | 15mLコニカル管×28 | 17×121 | | 3,060 | | 055-0750 |
| | 50mL (ガラス)×12 | 27~36.4×85~110 | | 2,970 | | 055-0740 |
| | 50mLコニカル管×12 | 30×117 | | 3,040 | | 055-0760 |
| | 100mL (ガラス)×4 | 38~46.5×113~120 | | 2,990 | | 055-1180 |
| | 175/200/225mLコニカル管×4 *3,4 | 61×118/61×130/61×137 | | 3,040 | | 055-0780 |
| | 250mL×4 *5 | 60~61.8×100~130 | | 3,080 | | 055-0780 |
| | 自立型喀痰チューブ×4/×8/×12 | キャップ径φ48/φ37/φ31 | | 3,020 | | *11 |
| | 500mL×4 *8 | 85×135 | | 3,080 | | — |

- *1 このチューブは、ベクトン・ディッキンソン社製バキュティナ8mL CPT単核球分離用採血管(公称φ16×125)です。
- *2 セキスイ社製インセパックII、テルモ社製ベノジェクトII、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュティナ各種5~10mLの細い・太い採血管が使用できます。フローサイト用チューブも使用できます。
- *3 ファルコンのコニカル管175mL/225mL(カタログNo.352076/No.352075)が、クッション(カタログNo.352090)を使うことで遠心できます。
- *4 ヌンクのコニカル管200mL(カタログNo.376813)が、クッション(カタログNo.377585)を使うことで遠心できます。
- *5 ナルジーン、ヘロラボ平底250mLボトルが使用できます。
- *6 キャップ径φ48×8本(コードNo.055-0430)、キャップ径φ37×12本(コードNo.055-0440)、キャップ径φ31×16本(コードNo.055-0450)の3種類があります。
- *7 セキスイ社製インセパックII、テルモ社製ベノジェクトII、ニプロ社製ネオチューブ、ベクトン・ディッキンソン社製バキュティナ各種5~7mLの細い採血管が使用できます。フローサイト用チューブも使用できます。
- *8 500mLボトル(コードNo.K15501C/ポリプロピレン・コポリマー)が使用できます。
- *9 シーリングキャップコードNo.055-0964(別売)が使えます。
- *10 175mLの遠心にシーリングキャップコードNo.055-0964(別売)が使えます。225mLには使えません。
- *11 キャップ径φ48×4本(コードNo.055-0810)、キャップ径φ37×8本(コードNo.055-0800)、キャップ径φ31×12本(コードNo.055-0790)の3種類があります。
- *12 このロータの納期は、お問い合わせください。

仕様

| | Model 7000 | Model 6000 |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 最高回転数 ● | 22,000rpm | 22,000rpm |
| 最大遠心力 ● | 52,490×g | 44,370×g |
| 最大処理量 ● | 4,000mL | 3,000mL |
| 制御方式 ● | マイクログロッセッサ制御 回転数、遠心力、時間、g・sec値、温度、加減速、メモリ30チャンネル ● サンプル出し忘れ防止機能 ● サンプル過熱、過冷却防止機能 (TEMP LIMIT) ● ロータ毎使用回数記録機能 ● 運転前ロータ種類識別機能 ● 遅延運転開始機能 | |
| 異常検知表示 ● | ドアオープン、インバランス、オーバースピード、ロータセット異常、異常高温 モータ・インバータ・ドアロック・回転センサ・温度センサ電気回路異常検知 | |
| 加速・減速 ● | 急、緩、超緩の3段階切替 | |
| 速度設定・表示 ● | デジタル表示、設定10rpmステップ、表示10rpmステップ | |
| 遠心力設定・表示 ● | デジタル表示、設定10×gステップ、表示10×gステップ | |
| インテグレート設定・表示 ● | デジタル表示、1.00～9.99×10 ⁹ g・sec | |
| タイマ設定・表示 ● | デジタル表示、ホールド (経過時間表示)、メモリフラッシング付 (特許) 1～100秒:1秒ステップ設定・表示 100～990秒:10秒ステップ設定・1秒ステップ表示 1～100分:1分ステップ設定・表示 100～990分:10分ステップ設定・1分ステップ表示 | |
| 温度設定・表示 ● | デジタル表示、-20℃～40℃、1℃ステップ設定・表示、ブレーキリング付 | |
| 冷媒 ● | R 404A | |
| 定格電圧・電流 ● | 単相200V・17A | 単相200V・12A |
| 消費電力・発熱量 ● | 2.6kW・9.5MJ/h | 1.8kW・6.5MJ/h |
| 必要電源 ● | 単相200V、50/60Hz・30A | 単相200V、50/60Hz・30A |
| 寸法・質量 ● | 64 (W) × 82 (D) × 86 (H) cm・245kg | 50 (W) × 78 (D) × 85 (H) cm・207kg |

使用上のお願い

このカタログに掲載されている製品は専門知識をもっている方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には適切な使用ができない場合があります。危険が伴うことがあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。



右記のような場合は、
使用を直ちに中止して
ください。

- ロータ、バケットに傷や、腐食がある。
- ロータの交換時期 (耐用年数) を超えたとき。
- コゲくさい臭いや異常に熱くなる。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

お願い

事故防止のため、電源スイッチを切り、電源から電源
プラグ / 接続端子をとりはずし、「使用禁止」の貼
紙をして、お近くの弊社に必ずご相談ください。



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

- 「取扱説明書」を紛失しないでください。
いつでも読める場所に保管してください。

保証に関する お願い

- 保証期間は次のとおりです。
製品一納入後1年間 部品一問い合せください。
- 保証書は商品の取扱説明書に添付しております。納品の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、ご購入店の店名、ご購入期日、型式名、製造番号の記載のないものは無効となりますので、必ず記入してください。
- 型式名と製造番号は品質管理上重要なものです。商品本体に製造番号が表示されておりますので、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

廃棄のお願い

医療関係機関で使用した遠心機は、廃棄物処理法により感染性廃棄物に指定され、特別管理産業廃棄物に該当します。
このため弊社で廃棄のためにお引取りすることはできません。[特別管理産業廃棄物収集運搬業]の許可を持った会社にご依頼ください。

中古品を販売される方へお願い

中古品を販売されるリサイクル店の方やリース会社の方は、下記の会社に右記の事項を文書にてお知らせください。トレーサビリティと安全性確保のため必要でございます。お知らせいただけないときは、弊社では事故・故障等の一切の責任が負えません。

通知先 株式会社久保田製作所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-23-23

譲渡される場合のご連絡事項 (○印をお知らせください)

| 項 目 | 現在のご利用者 | 譲渡先 |
|-----------|---------|-----|
| 機 種 名 (注) | ○ | — |
| 製造番号 (注) | ○ | — |
| ユーザ名 | ○ | ○ |
| 住 所 | ○ | ○ |
| 電話番号 | ○ | ○ |
| FAX番号 | ○ | ○ |

(注) 遠心機の本体の銘板・ネームプレートをご覧ください。

- Model 7000/6000は、理化学用で医療機器ではありません。
- 本カタログ記載の商品は、日本国内専用です。海外では使用できません。
- この商品の補修用性能部品の最短保有期間は製造打切後10年です。ただし、入手不可能な補給/補修部品は除きます。
- 価格、仕様、外観などは、お断り無く変更することがありますのでご了承ください。

ホームページをご覧ください。

www.kubotacorp.co.jp

久保田商事株式会社

E-mail: sales@kubotacorp.co.jp

<http://www.kubotacorp.co.jp>

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-9 ☎(03) 3815-1331 FAX(03) 3814-2574
札幌営業所 〒065-0015 札幌市東区北15条東 10-2-6 ☎(011) 751-2175 FAX(011) 751-2176
仙台営業所 〒984-0038 仙台市若林区伊在字東通 30 ☎(022) 287-2181 FAX(022) 287-2182
つくば営業所 〒305-0033 つくば市東新井 26-17 ☎(029) 856-3211 FAX(029) 856-5811
名古屋営業所 〒480-1156 長久手市五合池 2211 ☎(0561) 64-2351 FAX(0561) 64-2353
大阪営業所 〒540-0013 大阪市中央区久宝寺町 4-2-17 ☎(06) 6762-8471 FAX(06) 6762-8473
広島営業所 〒731-0138 広島市安佐南区祇園 4-51-26 ☎(082) 871-7811 FAX(082) 871-7828
四国営業所 〒799-3202 伊予市海海町上灘甲 6466-2 ☎(089) 986-5018 FAX(089) 986-5019
福岡営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津 5-21-10 ☎(092) 621-1161 FAX(092) 621-1162

製造販売元
許可番号 10B3X00003
株式会社久保田製作所
東京都豊島区東池袋 3-23-23